

# LABiONiQ

finest masterpieces made in germany

# maestro

family

*Art & Design*

„ Sie werden begeistert sein!

*Klaus Mütterthies*

Klaus Mütterthies



©Joachim Werner

maestro



maestro color



maestro eco



minimalistic - smart - hygienic - longlife

# maestro - Drei Kammern, die keine Wünsche offen lassen

classic

Die **maestro**, ausgestattet mit **drei Premium-Glasplatten**, ist das **ideale** Keramiktray für **Zahntechniker**, die mit einer **Vielzahl** von **Zahnfarben** und **Effektmassen** arbeiten.



color

Die **maestro-color** Keramikanmischplatte mit **integrierter Malfarbenpalette** ermöglicht auf **komprimierter Fläche** **effektives und ästhetisches Arbeiten**.



eco

Die **maestro-eco** ermöglicht das **effektive Arbeiten** auf **komprimierter Fläche** inkl. Ablagefach für Pinsel etc.. Diese können in der freien Kammer jederzeit griffbereit abgelegt werden.



# maestro-Vorteile

## ■ Hightech im Detail

Die **besondere Abstimmung** zwischen **Hightech-Befeuchtungsstreifen** und **Kapillarwirkung** ermöglicht eine **optimale Nachbefeuchtung** der Keramik.



## ■ Ideale Konsistenz

Die **angemischte Keramik** bleibt **tagelang feucht, verwässert nicht** und ermöglicht dadurch eine **optimale Verarbeitung**.

## ■ 100 % Nutzfläche



## ■ Pflegeleicht & Kostenoptimierung

Durch den intelligenten **3-Kammer-Aufbau** lässt sich jedes einzelne Modul **separat** entnehmen und reinigen. Hierdurch kann der **Keramikverbrauch** ganz entscheidend **reduziert** werden.




## ■ Deckel mit Funktion

Optimaler **Staubschutz** durch **dicht schließenden Deckel**, der auch zum **Ablegen** von Pinseln und Instrumenten geeignet ist.

## ■ Hygienisches Arbeiten

Die 3 Glasstreifen **reduzieren** das Flüssigkeitsvolumen um über **90%**. Beim **Nachfüllen** erfolgt immer ein nahezu **kompletter H<sub>2</sub>O-Wechsel**, wodurch hygienisches Arbeiten gewährleistet ist.

**H<sub>2</sub>O Menge für eine Kammer**

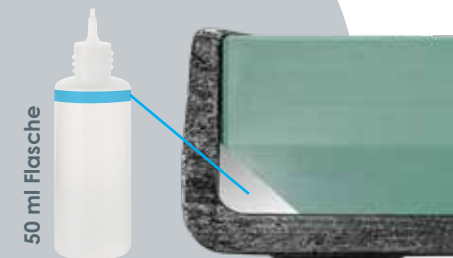

## maestro

### # maestro

(8-teilig)

1 x Unterteil

1 x Deckel

3 x Glasstreifen  
(32 x 183 x 10 mm)

3 x Befeuchtungsstreifen



## maestro color

### # maestro-c

(7-teilig)

1 x Unterteil

1 x Deckel

2 x Glasstreifen  
(32 x 183 x 10 mm)

2 x Befeuchtungsstreifen

1 x Malfarbenpalette (24 Mulden)  
aus Keramik (35 x 195 x 10 mm)



## maestro eco

### # maestro-e

(7-teilig)

1 x Unterteil

1 x Deckel

2 x Glasstreifen  
(32 x 183 x 10 mm)

2 x Befeuchtungsstreifen

1 x Filzstreifen



## Ersatzteile

Befeuchtungsstreifen

# m-4-S

4-teilig

Glasstreifen

# m-1-G

1-teilig

Keramikeinsatz

# m-1-K

1-teilig

Ihr Ansprechpartner

**Thomas H. Wendler**

CEO / master dental technician



+49 (0) 1511-019 1292

scan me

